	ZAŁĄCZNIK		Zał-05/PO-06/PQ-09
	ZASADY DEZYNFEKCJI I MYCIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO		Data zatwierdzenia: 17.11.2019r.
			Wersja II
			Strona 1 z 1

1. Fizjoterapeuta odpowiada za:

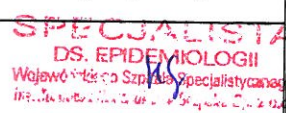
- a) dezynfekcję sprzętu, kozetek zabiegowych, krzeseł, stołów terapeutycznych, materacy, wałków, klinów, drabinek itp.

2. Firma sprzątająca odpowiada za:

- a) sprzątanie powierzchni użytkowych sal rehabilitacyjnych lub gimnastycznych.

3. **Zasady przeprowadzania dezynfekcji:**

- dezynfekcji podlegają sprzęty, które bezpośrednio lub pośrednio wchodzi w kontakt z pacjentem,
- preparaty dezynfekcyjne muszą być przechowywane w oryginalnych opakowaniach i powinny znajdować się możliwie blisko stanowiska pracy,
- powierzchnie stołów terapeutycznych oraz kozetek na których ćwiczą pacjenci należy dezynfekować po każdym jego użyciu (i przed użyciem jeśli jest taka potrzeba). Ze względów technicznych nie używa się prześcieradeł jednorazowych na sali gimnastycznej,
- powierzchni materaców, poręcze, bieżni, drabinki oraz sprzęt drobny należy dezynfekować po każdym użyciu,
- terapeuci po skończonej pracy z pacjentem zobowiązani są do dezynfekcji rąk zgodnie z SOP-08/PO-01/PE/PQ-09
- poduszki, wałki są obite skórą ekologiczną i po każdym zabiegu należy dezynfekować je preparatem wg wykazu środków dezynfekcyjnych,
- pacjent korzystając powinien z podkładów/ręczników przypisanych wyłącznie do jego zabiegów,
- pacjenci ambulatoryjni swój podkłady/ręczniki zobowiązani są przynosić każdorazowo na zabieg,
- pacjenci leżący na oddziałach – podkłady/ręczniki mają mieć podpisane (elektroterapia),
- przy zabiegach elektrycznych po każdym zabiegu elektrody podlegają dezynfekcji, według wskazań producenta
- po każdym zabiegu dezynfekowane są powierzchnie płaskie i aplikatory na stanowisku magnetronie,
- na stanowisku laseroterapii przed każdym zabiegiem należy czyścić pola zabiegowe jednorazowym gazikiem i preparatem do dezynfekcji skóry (spirytus Salicylowy) oraz po każdym użyciu okulary osłaniające oczy.

	Nazwisko i imię	Data	Podpis/pieczętka
Sporządził:	<i>Katarzyna Gorbowska</i>	<i>26.11.2019r.</i>	 <i>mgr Katarzyna Gorbowska</i>